

# VITAPAN PLUS®

Información de producto/Tarjeta de formas



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 02.11

VITA shade, VITA made.

**VITA**


Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER  
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)  
y los colores VITA classical A–D  
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).



## **VITAPAN PLUS®** Perfecto por dentro. Perfecto por fuera.

El progreso es la suma de lo conocido y lo nuevo. Aplicando esta filosofía, VITA ha modernizado y rediseñado con vistas al futuro el clásico VITAPAN. Se han perfeccionado sobre todo las características anatómicas. Así, el nuevo VITAPAN PLUS constituye la simbiosis perfecta entre estética y funcionalidad.

Al mismo tiempo, VITAPAN PLUS es el resultado de la perseverancia de VITA en dar respuesta a las exigencias de los clientes y en optimizar constantemente sus procesos conservando los métodos de trabajo habituales. Todo ello se traduce en un incremento de la seguridad, la satisfacción del cliente y el aseguramiento del futuro. Porque, en conjunto, VITAPAN ofrece ahora un mayor PLUS.

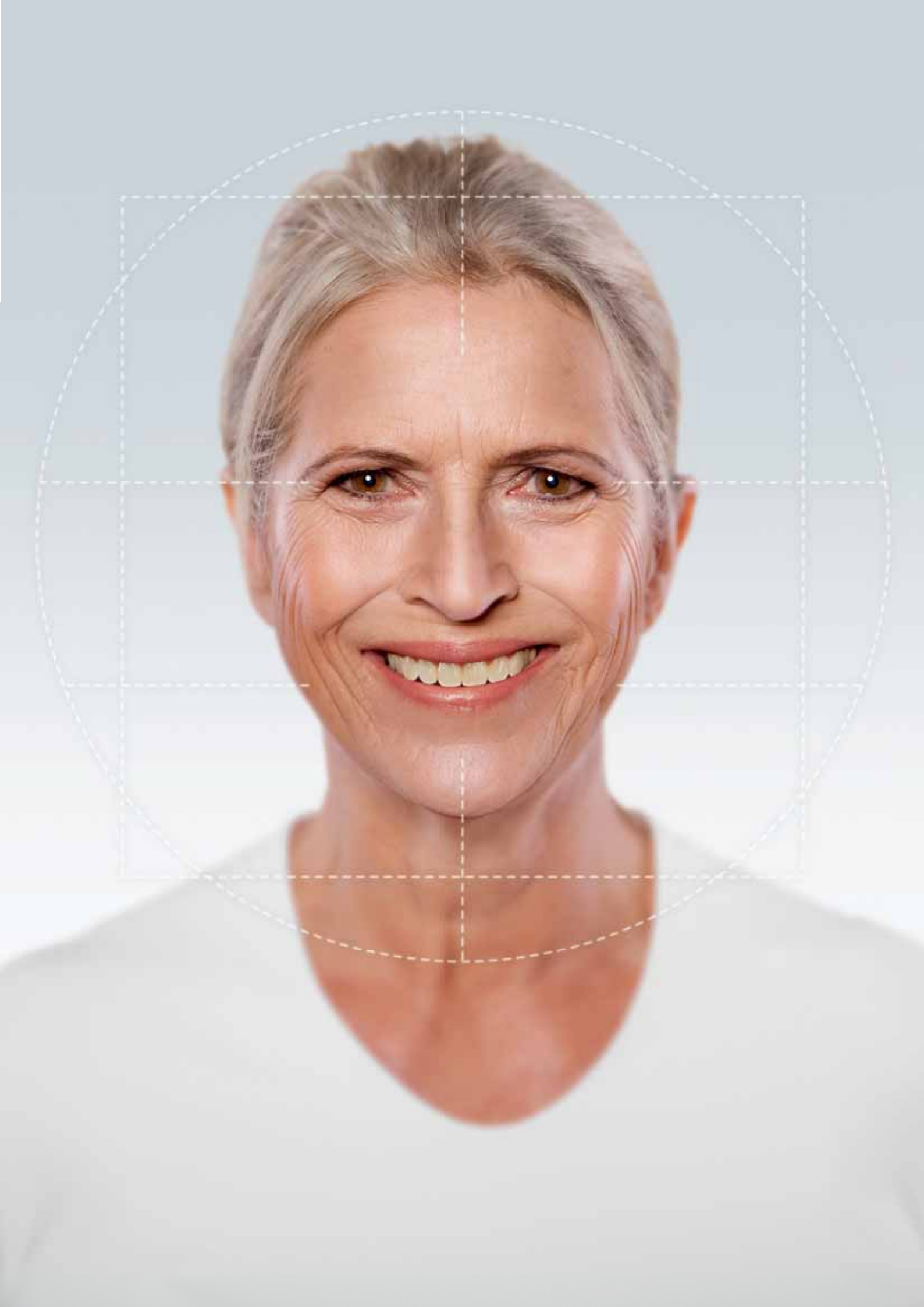

**VITAPAN PLUS®** Con una nueva forma basada en los deseos de clientes de todo el mundo.

“Innovaciones convincentes que amplían los métodos de montaje.”

“Un perfeccionamiento coherente y muy bien logrado.”

“Excelente anatomía con propiedades idénticas a los dientes naturales.”

“Estética impresionante gracias a la transición del esmalte y al efecto de profundidad del color.”

“La superficie y la estratificación convierten los dientes en toda una experiencia.”



Probado por alrededor de 300 participantes en talleres en más de 10 países. El resultado: más del 90 por ciento de aprobación.

“VITAPAN PLUS me permite satisfacer los requisitos cada vez mayores en cuanto a eficiencia. Para mí supone un verdadero hito.”

“VITAPAN PLUS representa, en mi opinión, un nuevo nivel de restauración dental multifuncional y de formas perfectas.”

“Cuellos dentales pronunciados para una modelación de las encías adecuada a la edad que facilita la higiene.”

“Práctica reducción del surtido de formas con una distribución de los tamaños adecuada.”

**VITAPAN PLUS®** perfecto por dentro, perfecto por fuera.



**Morfología superficial auténtica y diseño individual de mamelones**

 para un comportamiento natural de reflexión de la luz.

**Opalescencia, luminiscencia y translucidez**

 para un juego cromático lleno de matices.


**Bordes incisales blanquecinos**

 para una estética natural.

**VITAPAN PLUS®** perfecto por dentro, perfecto por fuera.




#### **Curvaturas características horizontales y verticales**

 para un apoyo eficaz del labio que permite conservar la fisonomía individual.




#### **Conformación natural de las superficies palatinas**

 para la conservación de la fonética y el tacto acostumbrado de la lengua.



#### **Características angulares bien definidas**


 para un resultado natural y estéticamente convincente.

#### **Conformación adecuada a cada tipo de la cresta marginal labial**


 para acentuar la personalidad del paciente.




#### **Cuellos dentales ligeramente más amplios con una transición continua del cuello a la corona del diente**

 para la máxima variedad: Cada juego ofrece, en virtud de la altura personalizada del recorrido gingival, múltiples posibilidades para una prótesis adecuada a la edad.




 para un modelado de las encías variado, con un cierre interdental seguro y fácil de limpiar.



 para una conformación bien proporcionada del espacio interdental con una buena cobertura de posibles elementos constructivos.

**VITAPAN PLUS®** Surtido concentrado, variedad maximizada.

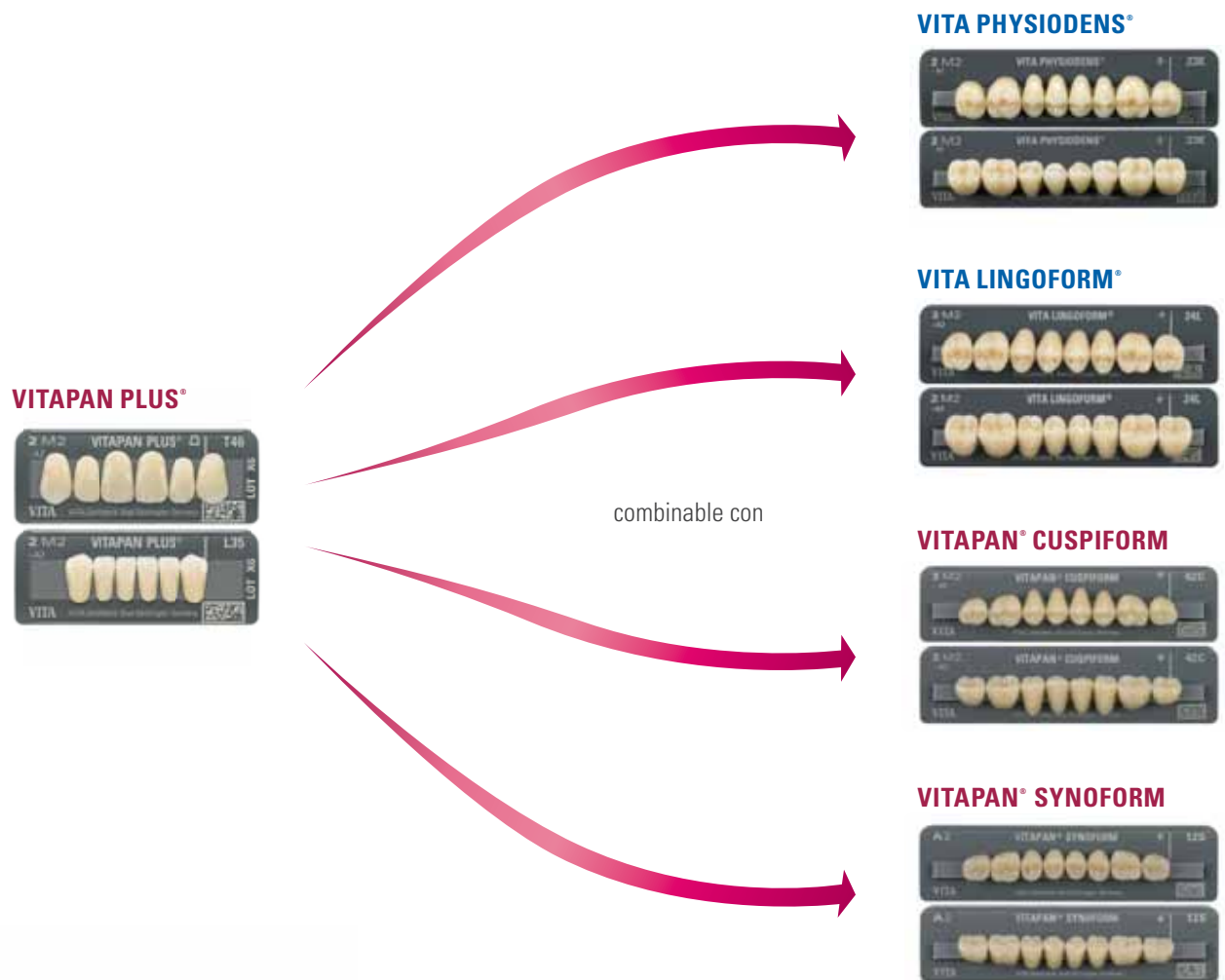

**Indicación del color**

**VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
(con el valor más próximo a los colores VITA classical A1–D4)  
**VITA classical A1–D4**

**Indicación de tipo**

**Indicación de forma**  
(la denominación del juego indica al mismo tiempo la anchura aprox. del juego)




**N° de lote**  
sin cifrar


**Código de matriz de datos**

Marcado CE 0124 en el dorso

# VITAPAN PLUS® Anteriores superiores

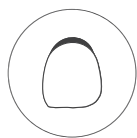


forma de pala

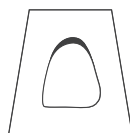

triangular


**041**

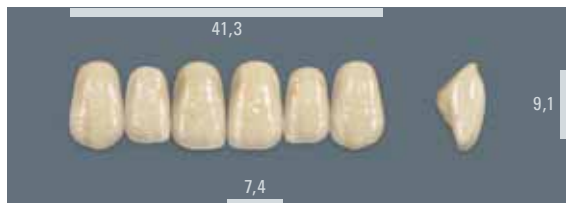

**T44**




**045**

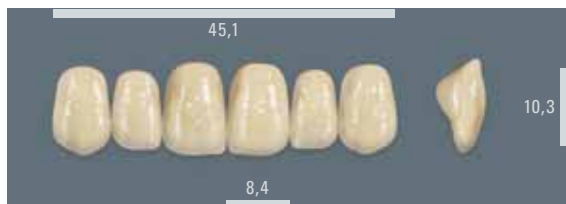

**T46**




**047**

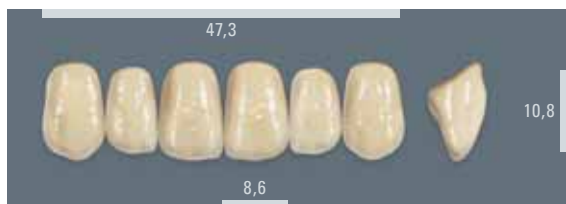



**T47**



**051**

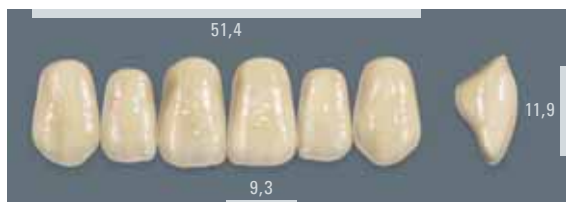


**T48**

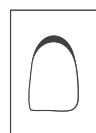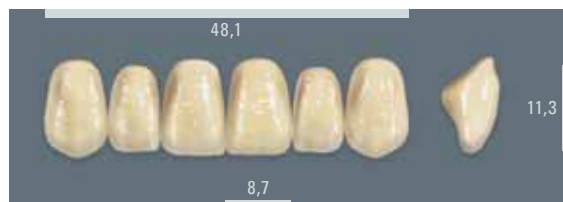


rectangular

**R47**

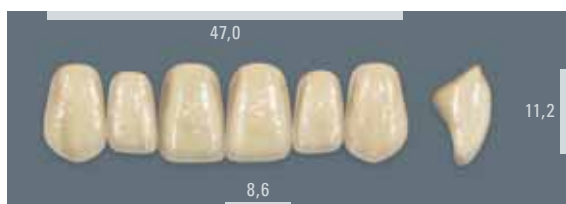

**R49**

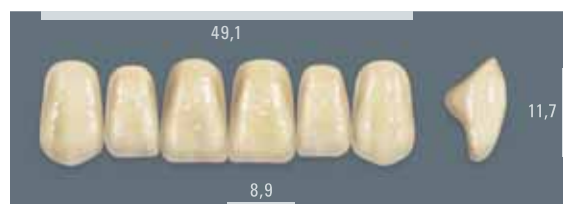




# VITAPAN PLUS® Anteriores inferiores y tabla de combinaciones


**L33**



**L35**

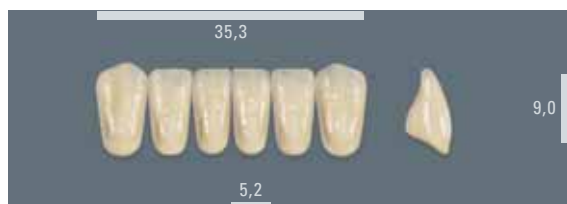

**L37**

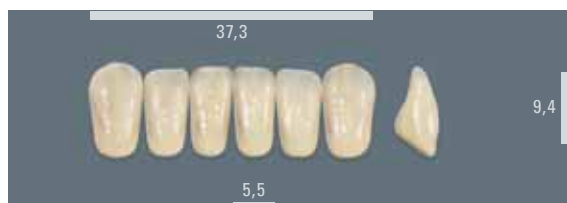




**L39**




**L41**






Nr.	 mm		 mm	Nr.	
<b>O41</b>	41,3	9,1	7,4	<b>L33</b> 33,2	<b>41C 11S 20E 21L</b> 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
<b>O45</b>	45,1	10,3	8,4	<b>L35</b> 35,3	<b>42C 12S 22E 22L</b> 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
<b>O47</b>	47,3	10,8	8,6	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 12S 22E 22L</b> 31,7 3,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
<b>O51</b>	51,4	11,9	9,3	<b>L41</b> 41,2	<b>45C 14S 24E 24L</b> 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
<b>T44</b>	44,1	9,9	8,1	<b>L33</b> 33,2	<b>41C 11S 20E 21L</b> 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
<b>T46</b>	46,2	10,4	8,2	<b>L35</b> 35,3	<b>42C 13S 23E 22L</b> 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
<b>T47</b>	46,9	10,9	8,5	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 13S 22E 22L</b> 31,7 31,3 32,9 31,6 33,4 33,9 33,7 32,1
<b>T48</b>	48,1	11,3	8,7	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 14S 23E 22L</b> 31,7 33,1 33,5 31,6 33,4 35,4 34,6 32,1
<b>R47</b>	47,0	11,2	8,6	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 13S 23E 22L</b> 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
<b>R49</b>	49,1	11,7	8,9	<b>L39</b> 39,0	<b>45C 14S 23E 23L</b> 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 34,6 34,8

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente.
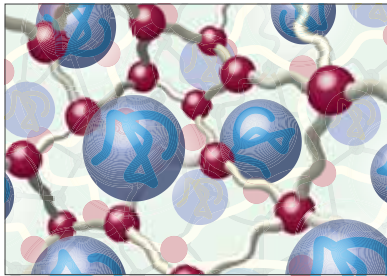
## VITAPAN PLUS® De buena pasta.



-  Perlas de PMMA, hinchadas por la introducción de monómero
-  Monómero reticulado
-  Relleno de micropartículas inorgánicas, introducido en la matriz mediante polimerización



VITAPAN® VITAPAN PLUS® VITA PHYSIODENS® VITA LINGOFORM®

### Dientes confeccionados con el material MRP de VITA: utilizados con éxito en millones de casos

- extraordinaria estética
- seguridad de manipulación
- comportamiento fiable del material durante el uso de la prótesis
- material de calidad extraordinaria: son los únicos dientes confeccionados con un material con microrrelleno homogéneo en todas las capas, y se caracterizan por una excelente resistencia a la abrasión y a la rotura.


El **material MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic)** desarrollado por VITA contiene micropartículas de relleno inorgánicas con una distribución perfectamente adaptada del tamaño de las partículas, que se han introducido en la matriz polimérica mediante polimerización.

**Esto garantiza un perfil de propiedades homogéneo y de alta calidad en todo el diente.**

Además, mediante el exclusivo proceso de fabricación NPV (procedimiento de postprensado) de VITA se obtiene **una estratificación completamente homogénea, caracterizada por una unión estrecha entre el cuello, la dentina y el esmalte, todos ellos a partir de un mismo material.**

A su vez, la estructura química se traduce en una elevada capacidad de carga mecánica, independientemente de si se trata de restauraciones soportadas por la mucosa o por implantes.

VITA MRP – valores de abrasión excelentes

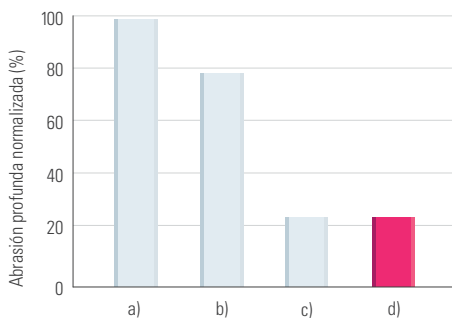

- a) PMMA reticulado
- b) PMMA altamente reticulado
- c) Composite nanohíbrido/de nanorrelleno
- d) VITA MRP

Fuente: Ensayos de abrasión in vitro, Universidad de Ratisbona, Alemania

### Características

- extraordinaria resistencia a la abrasión
- respetuoso con los tejidos y resistente a la formación de placa
- mecanizable sin astillamiento y sin mermas de calidad en el color y el material
- excelente facilidad de pulido, incluso tras el tallado selectivo en la boca
- unión excelente con el material de base de la prótesis

### Consecuencias

- larga vida útil de la prótesis
- elevada biocompatibilidad y excelente comodidad de uso
- ideal para prótesis implantosoportadas si se dan los requisitos correspondientes
- muy rápida aceptación de la prótesis por parte de los pacientes

### Beneficios

- seguridad en el proceso de confección de la prótesis
- pacientes totalmente satisfechos
- un plus de imagen para laboratorio y clínica dental

## Colores



VITA SYSTEM 3D-MASTER®									
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4M2	5M1
~B1	~B2	~A1	~A2	~C2/D4	~B3	~A3/D3	~A3,5	~A4	~C4



VITA classical A1-D4									
A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	C2	D3	D4

## Indicaciones

- Prótesis completas
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis con ataches
- Prótesis esqueléticas
- Prótesis telescópicas y cónicas

Surtidos*	
<b>Carta de formas vivas en varios colores en estuche de aluminio:</b>	10 juegos anteriores superiores + 5 juegos anteriores inferiores x 6 = 90 dientes
<b>Stock de dientes 1S:</b>	48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores inferiores x 6 = 432 dientes
<b>Stock de dientes 2S con VITA LINGOFORM® posteriores:</b>	48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores inferiores x 6 = 432 dientes 24 juegos posteriores superiores + 24 juegos posteriores inferiores x 8 = 384 dientes
<b>Stock de dientes 2S con VITAPAN® CUSPIFORM posteriores:</b>	48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores inferiores x 6 = 432 dientes 24 juegos posteriores superiores + 24 juegos posteriores inferiores x 8 = 384 dientes
<b>Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, S:</b>	(134 juegos, 804 dientes)
<b>Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, M:</b>	(267 juegos, 1.602 dientes)
<b>Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, L:</b>	(400 juegos, 2.400 dientes)

\*Para obtener información sobre las especificaciones exactas de los stocks de dientes, consulte al empleado de VITA encargado de su zona o a su distribuidor.

Este grupo de productos está disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1–D4. Se garantiza la compatibilidad cromática con todos los materiales VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.



Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si el producto se utiliza en una combinación incompatible o inadmisibles con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. Publicación de estas instrucciones de uso: 02.11

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124**:

**VITAPAN PLUS®**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com